

Vision For All's sorteringsinstruktion



För att underlätta arbetet som läggs ner på insamling och förberedelse av glasögon runt om i Sverige har vi följande instruktioner. Har du inte själv möjlighet att genomföra alla steg ber vi dig att följa de steg som passar för dig innan du skickar glasögon vidare till Vision For All.

Släng trasiga glasögon.
Släng alla fodral (dessa tar för mycket plats och vikt i bagaget vid våra resor).

1. Sortera



Repiga glas



Krackelerade glas



Trasiga delar
eller lagningar

Tips!

Gör en snabbkoll av styrkorna på glasögonen för att grovsortera redan innan tvätt.

2. Tvätta

1. Blötlägg i varmt vatten (ej hett) **med** diskmedel
2. "Rör runt" i baljan och låt stå 5 minuter
(Vid särskilt smutsiga glasögon, rengör med tandborste)
3. Flytta över till diskbalja med varmt vatten **utan** diskmedel
4. "Rör runt" i baljan och låt stå 5 minuter



Rengöring kring näsan

Torka



Lägg upp glasögonen på ett lakanbeklätt bord.
Torka glasögonen med en bomullstrasa
(t.ex. gammal handduk eller lakan).

3. Torka

4. Paketera

1. Paketera i **bananlådor**, för att de enkelt ska kunna staplas.
2. Lägg glasögonen i rader, lager på lager, som på bilden.
3. Mellan varje lager läggs ett tidningspapper.
4. Märk upp lådan med aktuell status t ex: "ej tvättat", "sorterat", "sorterat och tvättat - klara att mäta" etc.



Vänligen skicka bananlådorna som företagspaket till:

Vision For All
Torvingegatan 1
582 78 Linköping

Använd påsar i storleken 9x19 cm ungefär.
Går att beställa från Paul
Hall AB: 036-34 11 00

5. Uppmätning


OD = Oculus Dexter = Höger öga
OS = Oculus Sinister = Vänster öga
OA = Oculi Ambo = Båda ögonen
ADD = Addition, lästillägget på bi- eller multifokala glasögon

Skillnaden mellan glasens

Sfäriska ekvivalent: max 0,75 D.
Cylinderstyrka: max 0,75 D.



Single Vision, samma styrka
OA: +3,75

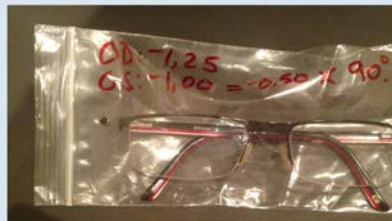

Single Vision, olika styrka
OD: -1,25
OS: -1,00 = -0,50 x 90°



Bi- eller multifokala
OD: -4,25 = -0,25 x 10°
OS: -3,75 ADD: +2,50

Single-vision styrkor skrivs direkt på påsen med permanent, medium (M) spritpenna.

Rött för minus

Blått / Svart
för plus

För **bi- och multifokala** skrivs styrkan på en märkeslapp, som kan skrivas ut från hemsidan, och som läggs **synligt** i påsen tillsammans med glasögonen.

Tips!

Gallra hårdare vid styrkor nära +/- 0,00 D, eftersom dessa är svåra att dela ut.
Tex sfär +0,50 med cylinder -0,25.